

SÉRIE Q300[®]

Dimensions compactes. GRANDES performances.



Q300 M Mini Kids



Q300 M Mini avec SEDEO LITE



Q300 M Mini avec SEDEO PRO

THE POWER OF QUICKIE

Que vous ayez besoin d'un fauteuil roulant électrique pour vous déplacer ou pour une rééducation plus complexe, il y a un QUICKIE pour vous. La série Q de Quickie est disponible avec une large gamme de bases motrices avec différents types de traction, de systèmes d'assise, d'électronique, de commandes et d'accessoires, pouvant être combinés afin de créer le fauteuil parfait en fonction des besoins individuels de chaque personne.

BESOINS CLINIQUES



Q50 & Q50 Carbon

ASSISE
TOILE

BASE
R



Q100

ASSISE
TOILE

BASE
R



Q200

ASSISE
TOILE

BASE
R



Q300

ASSISE
SEDEO PRO
SEDEO LITE
KIDS

BASES
M
R



Q400

ASSISE
SEDEO LITE

BASES
M
R



Q500

ASSISE
SEDEO PRO

BASES
M
R



Q700

ASSISE
SEDEO PRO ADVANCED
[M & F]
SEDEO PRO
SEDEO PRO pour HD

BASES
M
R
F



Q700-UP

ASSISE
SEDEO PRO ADVANCED
UP

BASES
M
F

□ M : Roues Motrices Centrales 6 roues
□ R : Roues Motrices Arrière Propulsion

□ F : Roues Motrices Avant Traction

PERFORMANCES BASES MOTRICES

ACCESSIBILITÉ SANS LIMITES AVEC LE Q300 M MINI.

Toujours aussi étroit avec ses **520 mm de largeur**, le nouveau **Q300 M Mini** est le plus compact des fauteuils roulants électriques avec une **VÉRITABLE traction centrale** - avec un **rayon de giration** de seulement **560 mm**. Non seulement vous pouvez aller là où les autres ne peuvent pas, mais vous pouvez aussi faire demi-tour où ils ne peuvent pas !

Un niveau supérieur a été franchi pour les **performances en extérieur** grâce notamment au système de **suspension breveté aux 6 roues** - chaque roue est amortie pour une conduite sûre et confortable. Sortir des sentiers battus? Avec les **moteurs 2 pôles**, 6 km/h et 10 km/h (incluant Gyro), vous circulerez sur les terrains les plus difficiles avec aisance, là où d'autres feraient demi-tour. Et inutile de vous presser de rentrer, puisque le **Q300 M Mini** permet de **parcourir jusqu'à 35 kms** avec des batteries de 56Ah.

Disponible avec TROIS systèmes d'assise différents - SEDEO LITE (p.16), SEDEO PRO (p.17), KIDS SEAT (p.20) - le Q300 M Mini combine les performances d'une base motrice éprouvée à des systèmes d'assise dédiés aux besoins cliniques de différents groupes d'âge. Complété par de nombreuses fonctions électriques, la série Q300 M Mini offre un haut degré de flexibilité et de modularité pour répondre à toutes les situations.

Vous pouvez même accessoriser toutes les zones de votre Q300 M Mini ! Avec des motifs de carénage personnalisés et des inserts de couleur, le Q300 M Mini est le fauteuil électrique idéal pour exprimer votre personnalité.



Scannez le QR code avec l'appareil photo de votre téléphone pour regarder la vidéo.



ESPACE EXIGU? PLUS D'INQUIÉTUDE !

Vous en avez assez qu'on vous dise où vous ne pouvez pas aller? La base ultra-compacte de 520 mm est si ridiculement étroite qu'elle ira où les autres ne peuvent pas aller.

520 mm

1120 mm



ULTRA-COMPACT - RAYON DE GIRATION 560 MM

Grâce à sa VÉRITABLE technologie de traction centrale, le Q300 M Mini tourne sur place, garantissant un rayon de giration ultra-réduit de 560 mm. En comparaison, les fauteuils électriques avec une base motrice traction et propulsion doivent pivoter sur leurs roues motrices, augmentant ainsi le débattement nécessaire pour tourner.



QU'EST-CE QU'UNE VRAIE TECHNOLOGIE ROUES MOTRICES CENTRALES?

Les roues motrices sont positionnées précisément au milieu du fauteuil. Si elles sont placées plus en avant ou en arrière, le diamètre de giration et l'espace de manœuvre nécessaire pour faire demi-tour entre deux murs augmentent. D'autre part, le poids étant moindre sur la roue motrice, la traction est réduite. Grâce à sa VÉRITABLE traction centrale, le Q300 M Mini offre le rayon de braquage le plus compact, ainsi qu'une traction et une stabilité supérieures.



LARGEUR RÉDUITE : 520 MM SEULEMENT

La base motrice du Q300 M Mini est si étroite qu'elle permet d'aller là où les autres fauteuils électriques ne peuvent pas aller. Qu'il s'agisse d'un salon exigu, d'une cuisine encombrée ou d'une porte étroite, avec sa largeur de 520 mm (avec ses roues motrices de 12") le Q300 M Mini passe sans problèmes.



ACCOUDOIRS QUI SIMPLIFIENT LES TRANSFERTS

Les accoudoirs relevables facilitent un transfert latéral : une fois relevés, les côtés du fauteuil sont complètement dégagés. D'autres accoudoirs amovibles ou escamotables vers l'arrière sont disponibles en option.



410 mm

HAUTEUR D'ASSISE MINIMALE (À PARTIR DE 41 CM)

Un des objectifs lors de la conception du Q300 M Mini était de pouvoir offrir une hauteur d'assise minimale. Le résultat : une hauteur de 41 cm (bascule d'assise manuelle), 43 cm (bascule d'assise électrique ou combiné lift + bascule d'assise électrique).

LONGUEUR DE BASE 1060 MM SEULEMENT

Avec une longueur de seulement **1060 mm** (avec repose-pieds central), le Q300 M Mini rentre facilement dans les plus petits ascenseurs et les endroits restreints, comme les cuisines. Son poids, à partir de **103 kg** lui permet d'emprunter sans problèmes la plupart des plateformes élévatrices pour fauteuils roulants.



1060 mm

BOÎTIER DE COMMANDE GÊNANT?

Pour tous ces moments où vous avez besoin de vous rapprocher un peu plus, pivotez simplement votre manipulateur sur le côté (ou éventuellement relevez



ÊTRE AU PLUS PRÈS AVEC LE REPOSE-JAMBES CENTRAL

Manoeuvrer dans un espace restreint ? Le repose-jambes à montage central supprime le dépassement à l'avant que nécessite des repose-jambes latéraux traditionnels. On peut donc non seulement effectuer des virages serrés sans vous préoccuper d'accrocher des objets, mais aussi se rapprocher des tables. Il est tout aussi facilement réglable en longueur et en angle.

PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

Faites l'expérience d'un VRAI fauteuil électrique compact aux performances extérieures VRAIMENT sensationnelles. Étroit et agile dans une ville bondée et offrant de GRANDES performances en extérieur, il a une longueur d'avance sur ses concurrents.

TECHNOLOGIE ANTI-PITCH

Pour un maximum de stabilité et de sécurité, un système anti-tangage ingénieux empêche le châssis de basculer trop vers l'avant quand le fauteuil ralentit un peu brusquement.



SUSPENSION INDÉPENDANTE À CHAQUE ROUE

Grâce à notre système BREVETÉ les roues ont leur propre suspension et restent au sol pendant la transition des obstacles. Sécurité avant tout !



ROUES MOTRICES 14"

Pour la meilleure traction à l'extérieur, stabilité et franchissement d'obstacle, optez pour ces roues agressives de 14". De plus, la base de votre Q300 M Mini reste compacte, avec une largeur de seulement 570 mm.



FEUX DE POSITION LED SUR GARDE-BOUE


Nouvelle option offrant un éclairage avant et arrière (feux non homologués pour la route - sans clignotant). Montés sur le carénage.



DES SORTIES SANS SOUCIS

Avec des batteries de 56 Ah, le Q300 M Mini vous emmène partout avec une autonomie* impressionnante allant jusqu'à 36 km.

*autonomie selon ISO 7176-4

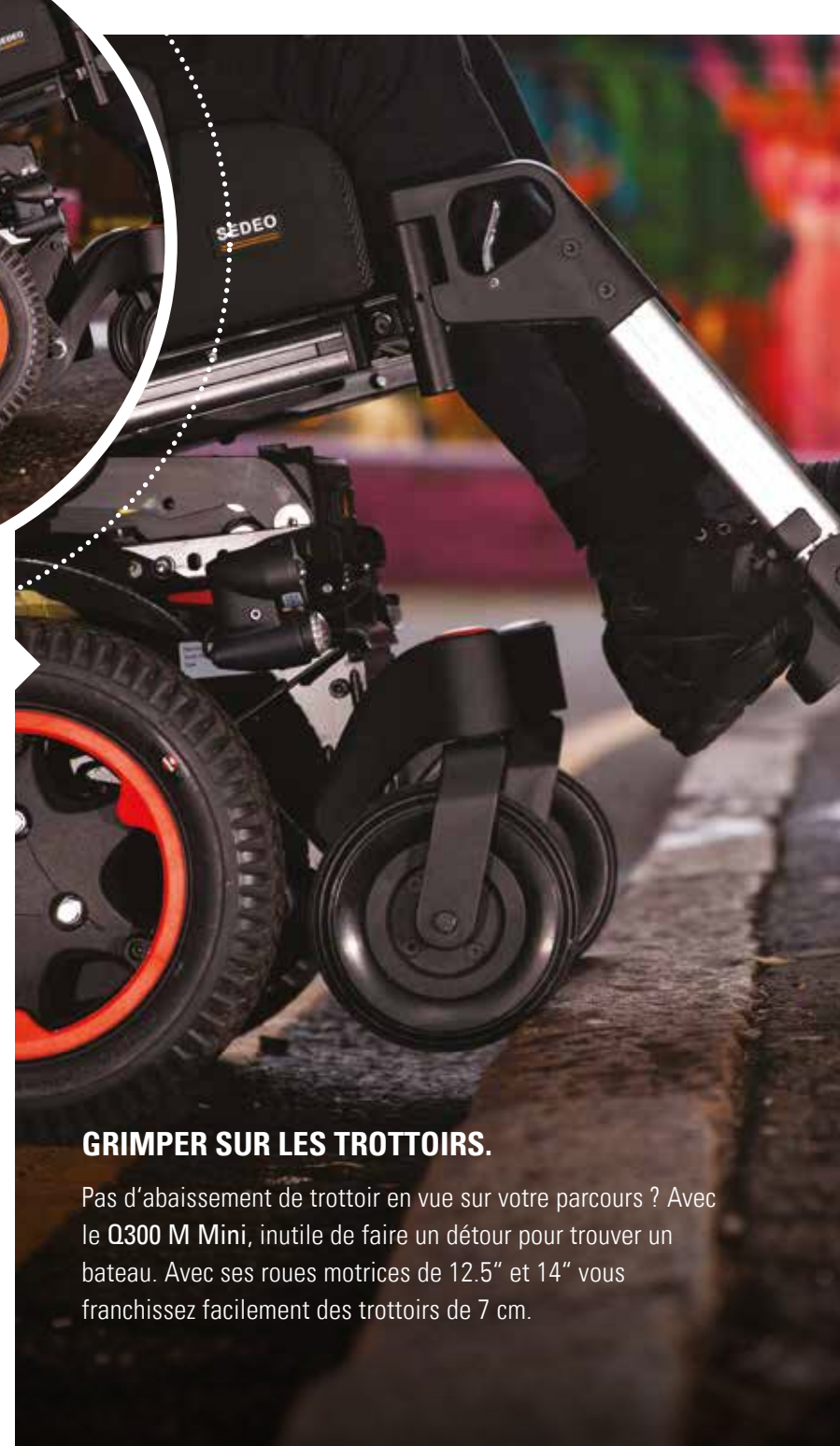

GRIMPER SUR LES TROTTOIRS.

Pas d'abaissement de trottoir en vue sur votre parcours ? Avec le Q300 M Mini, inutile de faire un détour pour trouver un bateau. Avec ses roues motrices de 12.5" et 14" vous franchissez facilement des trottoirs de 7 cm.

A man and a woman are riding electric scooters on a city street. The man, on the left, is wearing a dark jacket and a scarf, smiling at the camera. The woman, on the right, is wearing a yellow and white striped coat and a black beanie, looking towards the camera. They are both on black electric scooters. The background shows a paved street with other pedestrians in the distance.

QUICKIE MOTEURS 2-POLES

Nos 40 ans d'expérience ont permis de développer des moteurs plus durables et plus efficaces, offrant des performances, une maniabilité et une autonomie que les autres ne peuvent égaler.

PRÉSERVER LA PUISSANCE

Comme une voiture sur l'autoroute ou en ville, nos moteurs sont conçus pour des performances de conduite optimales, de sorte que vous obtenez la puissance quand vous en avez besoin (et la préservez quand vous ne l'avez pas).

AUGMENTER LA PUISSANCE

Une pente difficile ? Notre module de puissance et nos moteurs travaillent ensemble pour vous fournir 10 secondes de boost supplémentaire lorsque vous en avez le plus besoin.

RÉDUCTION DE LA CHALEUR

De plus grandes ailettes sur nos moteurs permettent une dissipation de la chaleur plus efficace, de réduire le risque d'échauffement du moteur pour un meilleur rendement

CONÇUS POUR DURER

Équipés d'engrenages métalliques polis (et non en plastique). Résultat : des moteurs plus silencieux et plus efficaces, quelles que soient les conditions d'usage.

COMPAGNON DE VOYAGE IDÉAL

Vous prenez les transports en commun ? La largeur ultra-réduite et le faible rayon de braquage du Q300 M Mini vous aideront à négocier les trajets les plus fréquentés.

GAIN DE PLACE

De nombreuses options du Q300 M Mini permettent de gagner de la place dans le véhicule, comme le dossier rabattable sur l'assise, les repose-jambes escamotables et amovibles ou encore les accoudoirs également amovibles. De plus, pesant **103 kg** seulement (batteries 41 Ah), le Q300 M Mini peut être soulevé et chargé sans effort dans votre véhicule.

Le Q300 M Mini est **crash-testé** avec la station d'arrimage Dahl.



TRACTION INCROYABLE SUR LES RAMPES

Parfois, la traction peut être perdue sur les rampes lorsque les roues avant forcent la roue motrice à quitter le sol. Avec le Q300 M Mini, les bras des roues avant se déplacent indépendamment de la base, de sorte que la roue motrice conserve sa traction.



FAUTEUIL ADAPTÉ AUX VÉHICULES AMÉNAGÉS

Grâce à sa hauteur d'assise très basse (à partir de 415 mm), le Q300 M Mini se glisse facilement sous le volant de votre véhicule aménagé. Ultra-étroit, aucun risque de s'accrocher à des éléments de l'habitacle de votre voiture.

A CHACUN SES POSITIONS D'ASSISE

Le Q300 M Mini n'a pas seulement des performances de GRAND fauteuil électrique, il a aussi les fonctionnalités d'un GRAND fauteuil électrique ! Qu'il s'agisse d'incliner, d'élever, de basculer l'assise ou relever les jambes, le Q300 M Mini est doté de nombreuses fonctions pour répondre aux besoins cliniques et mode de vie de ses utilisateurs.



REPOSE-JAMBES ÉLECTRIQUES

En relevant et en abaissant vos jambes, ces repose-jambes aident à réduire les gonflements et à améliorer la circulation. En s'ajustant en longueur, votre position assise reste constante, ce qui évite les mouvements indésirables du bassin. Le repose-jambes central (présenté ci-dessus) offre également un plus grand espace à l'avant de votre fauteuil pour les manoeuvres et les transferts.

BASCULE D'ASSISE

Ajustez votre posture grâce à la bascule d'assise électrique 30°. Elle aide à soulager les points d'appui en redistribuant votre poids du coussin vers le dossier. Maintenez une position assise confortable avec un effort musculaire réduit.

Besoin d'une angulation plus importante, alors optez pour le système d'assise Sedeo Pro et obtenez jusqu'à 50° de bascule d'assise.



300 mm

COMBINÉ LIFT ET BASCULE D'ASSISE

Atteignez de nouvelles hauteurs grâce au lift de **300 mm** et accédez à des objets du quotidien qui seraient autrement hors de portée. Vous pouvez également vous transférer plus facilement grâce à une position plus haute pour vous lever. Combiné à une bascule d'assise électrique (30° ou 50° avec l'assise Sedeo Pro) vous vous relaxez confortablement tout en soulageant vos points de pression.

DOSSIER INCLINABLE ÉLECTRIQUEMENT

De la même manière qu'un siège s'incline dans une voiture, le dossier inclinable électriquement permet de redistribuer votre poids sur une plus grande partie du dossier tout en maintenant un angle d'assise constant.



C-Me

ROULEZ À 4.5 KM/H TOUT EN ÉTANT LIFTÉ

Avec la fonction C-Me, vous vous élevez jusqu'à **300 mm** tout en roulant à **4.5 km/h** au même rythme et à la même hauteur que ceux qui vous accompagnent. Contrairement à d'autres fauteuils, la **suspension du Q300 M Mini ne se bloque pas**, de sorte que vous profitez d'une conduite souple et confortable du début jusqu'à la fin. Vous pouvez même monter ou descendre en appuyant sur un bouton, sans avoir besoin de vous arrêter pendant la transition !



Les couleurs présentées dans cette brochure peuvent varier par rapport aux couleurs réelles, en raison des contraintes imposées par le procédé d'impression utilisé.

PERSONNALISATION DÉBORDANTE

Le Q300 M Mini offre plus de 97 combinaisons de couleurs, y compris de nouveaux motifs pour le carénage ! Vous pouvez même coordonner ou contraster les couleurs de votre choix grâce à des inserts supplémentaires, pour les enjoliveurs et les bouchons de tête de fourches. Alors quelle est votre combinaison préférée ?

Floral White

Carbone

Flame Asteroid Grey

Flame Sharp Blue

Flame Hot Red

Flame Pure White

Grey Burst

Pink Burst

Purple Burst

Blue Burst

Red Burst

Pure White Burst

CARÉNAGES UNIS:



INSERTS:



APPUI-TÊTE UNIVERSEL

Le support d'appui-tête monté sur les systèmes d'assise **Adulte** et **Kids** est compatible avec les têtes SEDEO et WHITMYER, répondant ainsi à toute une série de besoins, allant du soutien de base à un soutien multipoint.

IL Y A UN Q300 M MINI POUR TOUS LES ÂGES!

Le Q300 M Mini combine sa base motrice haute-performance avec différents systèmes d'assise dédiés aux adultes et aux enfants qui répondent spécifiquement à vos besoins cliniques.

SYSTÈME D'ASSISE SEDEO LITE

Combinant un cadre réglable et configurable avec une large gamme de coussins de confort et d'options de positionnement, l'assise SEDEO LITE est idéale pour les Utilisateurs aux besoins cliniques légers à modérés.

ACCOUDOIRS RELEVABLES

Il suffit de basculer ces accoudoirs vers l'arrière pour obtenir un plus grand espace lors des transferts dans et hors de votre fauteuil. Disponible également en version amovibles ou escamotables vers l'arrière.

REPOSE-JAMBE A COMPENSATION, REPOSE-PIEDS LATÉRAUX

Facilement réglables en longueur pour obtenir le meilleur ajustement possible, les repose-pieds s'escamotent pour faciliter les transferts dans et hors de votre fauteuil électrique. Également disponibles : repose-jambes électriques et central.

UTILISATEURS
AUX
BESOINS LÉGERS
À MODÉRÉS

TOILE DE DOSSIER CONFORT

De série, le Q300 M Mini est équipé d'un dossier réglable en hauteur, garni d'une toile confort épaisse avec housse micro aérée et de 4 sangles réglables en tension.

Pour encore plus de confort et un positionnement accru, optez pour un coussin d'assise et de dossier SEDEO (présenté ci-contre) ou JAY.




Scannez le QR code avec l'appareil photo de votre téléphone pour regarder la vidéo.



RAIL D'ASSISE

Le rail intégré à l'assise offre de nombreuses possibilités de fixation d'éléments de positionnement, comme par exemple: cales cuisses, cales genoux, ceintures, protège-vêtements... montage rapide et simple!

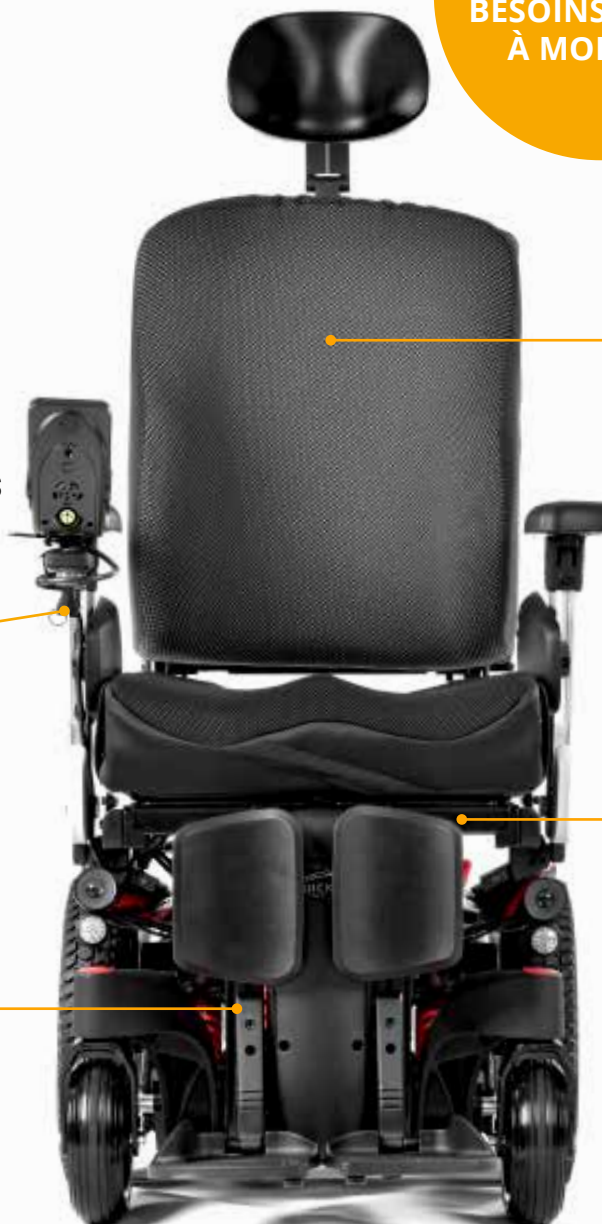

SYSTÈME D'ASSISE SEDEO PRO

Cadre d'assise hautement réglable et configurable avec un large choix d'options et d'accessoires de positionnement. SEDEO Pro offre une grande flexibilité pour s'adapter aux exigences individuelles des Utilisateurs présentant des besoins cliniques modérés à complexes.



COMBINÉ LIFT ET BASCULE D'ASSISE

Le lift permet d'atteindre des zones jusque là inaccessibles. Combiné à une bascule d'assise de 30° ou de 50°, il contribue à réduire les points d'appui en aidant à maintenir une posture correcte et en assurant le confort de l'Utilisateur.



UTILISATEURS
AUX
BESOINS
MODÉRÉS À
COMPLEXES

INCLINAISON DE DOSSIER ÉLECTRIQUE 90°/150°

Cette fonction facilite la respiration et prévient des lésions cutanées dues à la pression et les complications digestives.

DOSSIER À COMPENSATION

Une compensation sur 10 cm permettant au dossier de glisser pendant l'inclinaison. Vous conservez ainsi une posture correcte durant toute la phase d'inclinaison et au retour de l'inclinaison.



Scannez le QR code avec
l'appareil photo de votre
téléphone pour regarder la vidéo.

COUSSIN DE DOSSIER SEDEO PRO FLEXIBLE

Équipez votre Q300 M Mini de ce dossier unique qui combine un soutien dorsal complet, réglable sans effort et un support latéral du tronc avec un niveau d'immersion si élevé que vous devrez le sentir pour le croire.

S'ADAPTE À VOTRE COLONNE VERTÉBRALE

Contrairement aux dossiers rigides, le dossier flexible SEDEO PRO s'enroule et épouse la forme de votre colonne vertébrale pour offrir un contact total, un grand confort et une stabilité optimale. Les supports latéraux intégrés épousent votre buste, ce qui permet à la mousse d'épouser vos courbes anatomiques et de soutenir votre tronc de façon stable et alignée.

L'immersion est telle que même les personnes présentant des **postures cyphotiques** modérées à sévères peuvent se tenir assise beaucoup plus droites sans compromettre leur confort.



Scannez le QR code avec l'appareil photo de votre téléphone pour regarder la vidéo.

S'ENROULE ET SE MOULE À VOTRE CORPS

Lorsque vous vous asseyez, les supports latéraux **'épousent'** vos côtés, permettant à la mousse immersive de se mouler à vos courbes anatomiques. Comme une plus grande partie de votre corps est en contact avec le support, la pression est mieux répartie, évitant ainsi l'inconfort ou l'augmentation de la pression.

La stabilité et l'alignement du tronc sont assurés par les supports latéraux. Intégrés à l'intérieur du dossier pour un aspect lisse et attrayant, ils ne bougeront pas et ne glisseront pas non plus avec le temps. Réglables de manière indépendante, ces supports peuvent être :

1

Positionnés vers l'intérieur ou vers l'extérieur



2

Déplacés vers le haut ou le bas



3

Verrouillés pour soutenir des postures comme la scoliose ou desserrés pour une plus grande liberté de mouvements



zippie

Q300 M MINI kids

UNE ASSISE QUI ÉVOLUE AVEC VOTRE ENFANT

Grandir ne signifie pas renoncer à un fauteuil électrique. Nous avons conçu l'assise du Q300 M Mini Kids pour que vous n'ayez pas à craindre les poussées de croissance de votre enfant. Réglable en largeur **(280-400 mm)** et en profondeur **(260-400 mm)**, il est idéal pour ceux qui ont besoin d'une largeur d'assise étroite, mais d'un ajustement plus important de la profondeur au fil du temps.



DOSSIER SEDEO LITE

Nous avons conçu ce coussin de dossier spécialement pour les enfants. Enveloppant pour le confort et des supports latéraux intégrés à l'intérieur du dossier. Ne pouvant pas bouger et glisser au fil du temps, ces supports latéraux garantissent ainsi une stabilité constante du tronc - idéal pour les enfants actifs! Et les huit sangles réglables en tension offrent un soutien personnalisé, où que les enfants aillent.



ENCORE PLUS DE SÉCURITÉ

L'arrêt est une question de sécurité. Le boîtier d'arrêt à distance permet à un accompagnateur d'arrêter le fauteuil roulant électrique par le biais d'une télécommande RF à une distance maximale de 30 mètres (en fonction de la localisation).



Scannez le QR code avec l'appareil photo de votre téléphone pour regarder la vidéo.



SE DÉPLACER TOUT EN CONFORT

FONCTION C-Me

Avec C-Me, votre enfant peut s'élever jusqu'à 300 mm et conduire jusqu'à 4.5 km/h en même temps! Votre enfant peut désormais suivre ses amis à leur rythme et être à leur hauteur, le tout en appuyant sur un simple bouton, sans avoir besoin de s'arrêter.



SUPPORT DE COMMANDE ESCAMOTABLE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Manipulateur pas à la bonne position? Ce support de commande offre **3 positions** : vers l'extérieur (pour se rapprocher des tables), vers l'intérieur (pour les enfants avec une dextérité des mains limitée) et la position de conduite standard.



MANIPULATEUR R-NET ADVANCED

Offrez lui le meilleur de la technologie embarquée avec ce manipulateur grand écran HD facile à lire et des touches simples à activer. Avec les fonctionnalités Bluetooth et i-device intégrées, il pourra commander la télévision, son téléphone et d'autres appareils à partir de son Q300 M Mini Kids.



REPOSE-PIEDS Z-FINITY

Réglage en continu entre **160 mm** au-dessus de l'assise jusqu'à **480 mm** au-dessous. Ces repose-pieds offrent un soutien aux enfants en pleine croissance. Son support pivotant permet de régler à l'infini l'angle et l'emplacement des palettes (pour un positionnement idéal des pieds, des chevilles et des genoux).



JAY & WHITMYER

OPTIONS DE POSITIONNEMENT

Une large gamme d'appuis-tête WHITMYER, de coussins et de dossiers JAY sont adaptables sur les systèmes d'assise SEDEO LITE, SEDEO PRO et également sur l'assise Kids pour répondre aux besoins cliniques de chacun.




APPUIS-TÊTE WHITMYER

Conçus pour répondre aux besoins simples de soutien de la tête comme au contrôle de plusieurs points. Différents choix de coussinets, de tailles et de supports pour couvrir et personnaliser tous les besoins individuels.

COUSSINS ET DOSSIERS JAY

Conçus pour la stabilité du bassin, la protection de la peau et le confort. Les coussins et dossiers JAY sont disponibles en diverses tailles, formes, galbes, contours, matières, degrés de prévention... pour satisfaire les différents besoins en matière de soutien postural et protection cutanée.

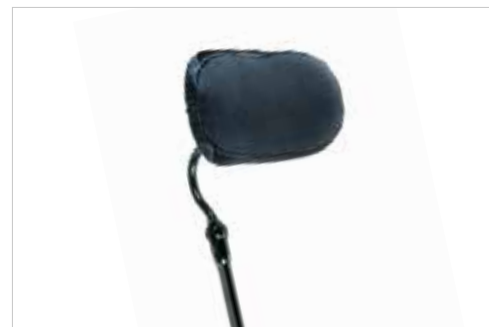

R-NET

Chaque Q300 M Mini est équipé de l'électronique évolutive **R-Net** pour une expérience de conduite unique. Différents manipulateurs pour répondre à divers besoins, tous simples d'emploi et intuitifs. Tel que le boîtier, de série, **R-Net LCD** doté d'un écran couleur pour un visuel clair et précis ou pour rester connecté à votre environnement le modèle **R-Net Advanced** aux multiples fonctionnalités intégrée (photo ci-contre).

CONNEXION INFRAROUGE

Prenez le contrôle de votre environnement en utilisant la fonctionnalité Infrarouge intégrée. Contrôlez simplement par votre joystick, vos appareils, tels que téléviseur, DVD, station d'accueil ... ou encore allumez et éteignez les lumières de votre intérieur.

CONNEXION BLUETOOTH

Prenez le contrôle de votre environnement en utilisant la fonctionnalité Infrarouge intégrée. Contrôlez simplement par votre joystick, vos appareils, tels que téléviseur, DVD, station d'accueil ... ou encore allumez et éteignez les lumières de votre intérieur.

ASSIGNATION DE BOUTON QUICKIE BREVETÉE

Changez la fonction de n'importe quel bouton par celle de votre choix, grâce à la technologie d'assignation BREVETÉE QUICKIE. De plus, vous pouvez attribuer une seconde fonction (appui long) à un même bouton, vous donnant un accès plus rapide, plus simple et plus fluide aux fonctions que vous utilisez régulièrement sans avoir à utiliser votre joystick.



SWITCH-IT

COMMANDES INNOVANTES

Activez confortablement vos 5 positions d'assise avec le **boîtier Ctrl+5**, la parfaite combinaison avec la **Mémorisation des Positions d'Assise**. Il vous permet d'accéder directement à la fonction souhaitée sur simple pression d'un bouton.

COMMANDES DE CONDUITE ALTERNATIVES

Si vous ne pouvez pas conduire votre fauteuil avec un joystick traditionnel, un large choix de commandes spéciales vous permettent de profiter pleinement des capacités et des avantages de votre fauteuil. Ci-dessous trois exemples.

1 - Commande occipitale Dual Pro: contacteurs sensitifs et à pression pour une conduite proportionnelle, coussinets latéraux ronds ou ovales (au choix)



2 - Commande proportionnelle manuelle MicroPilot: joystick isométrique, force de poussée 10 à 50 gr, débattement 0°. Commande fixée sur plateau appui-palmaire.



3 - Commande au menton Mo-Vis Allround: joystick compact. Supports de fixation possibles: plastron, bras manuel ou électrique escamotable.



LINK-IT

SYSTÈME DE MONTAGE

Discrétion, simplicité et personnalisation. Ce nouveau système **Link-It** facilite le montage de **contacteurs additionnels** ou de **commandes spéciales**.

Grâce à ses **combinaisons infinies** constituées de modules et de tiges, **Link-It** répond à tous les besoins cliniques, des plus simples au plus complexes. Non seulement, positionner les éléments **Link-It** est un jeu d'enfant, ils sont également très discrets et modernes. L'ajout de commandes et contacteurs ne compromet en rien le design élégant de votre fauteuil roulant.

Ainsi, que ce soit un manipulateur complémentaire à ajouter sur l'accoudoir, un bouton poussoir ou un contacteur sur le dossier, just link it!.



DONNÉES TECHNIQUES



DONNÉES TECHNIQUES SYSTÈMES D'ASSISE



**Q300 M Mini avec
SEDEO LITE**



**Q300 M Mini avec
SEDEO PRO**

Dimensions

Largeur d'assise réglable	385 - 510 mm	380 - 560 mm
Profondeur d'assise réglable	410 - 560 mm	400 - 560 mm
Hauteur d'assise	410 - 490 mm	410 - 490 mm
Bascule d'assise manuelle (par platine)	0 - 9°	0 - 9°
Bascule d'assise électrique	0 - 30°	0 - 50°
Hauteur de dossier	460 - 510 mm	530 - 720 mm
Inclinaison de dossier	85 - 120°	85 - 120° 85 - 150°
Poids max. Utilisateur	136 kg	136 kg

Options

Système d'Assise	SEDEO LITE	SEDEO PRO
Coussin de dossier SEDEO PRO Flexible	●	●
Coussin de dossier SEDEO LITE Adulte	●	-
Coussin de dossier SEDEO LITE Kids	-	-
Inclinaison de dossier électrique	●	●
Repose-jambes électriques	●	●
Contacteur d'arrêt d'urgence	●	-
C-Me	●	●
Repose-pieds Z-Finity	-	-

● Disponible



Q300 M Mini Kids

280 - 400 mm
260 - 400 mm
410 - 490 mm
0 - 9°
0 - 30°
380 - 485 mm
85 - 120°
75 kg
Kids seat
-
-
●
●
●
●
●
●

DONNÉES TECHNIQUES BASE MOTRICE



Dimensions	
Largeur totale	A partir de 520 mm
Longueur totale (avec potence centrale)	A partir de 1 060 mm
Diamètre de giration	A partir de 1 120 mm
Degré de pente	8°
Franchissement maximal	50 mm (avec roues motrices 12") 60 mm (avec roues motrices 13") 70 mm (avec roues motrices 14")
Autonomie maximale (ISO 7176-4)	Jusqu'à 25 km (batteries 41 Ah) Jusqu'à 36 km (batteries 56 Ah)
Poids produit (avec batteries)	A partir de 103 kg
Roues motrices	12" / 13" / 14"
Vitesses maximales	6 km/h / 8 km/h / 10 km/h
Batteries	41 Ah / 50 Ah / 56 Ah
Électronique	R-NET
Transport à vide	Fixer le fauteuil roulant en toute sécurité dans le véhicule (ex. voiture ou avion)
Usage et environnement	Pour les personnes à mobilité réduite, utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Fauteuil roulant de classe B

«Les photos figurant sur la présente brochure et sur les autres documents commerciaux de la société SUNRISE MEDICAL ne constituent en aucun cas un descriptif technique précis des fonctionnalités du produit concerné. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et ses conditions d'utilisation, reportez-vous à la fiche technique ou au manuel d'utilisation ».

Pour plus d'informations, sur les fonctions, options et accessoires, veuillez vous référer à la fiche de mesure.
Sunrise Medical se réserve le droit de modifier les données techniques de ses produits sans préavis.



VOUS RECHERCHER QUELQUE CHOSE D'UNIQUE?

Le service BUILT-4-ME a créé des milliers de fauteuils électriques sur mesure. Si vous souhaitez sortir du cadre classique, nous vous aiderons à créer un fauteuil vraiment unique. Pour en savoir plus :

www.sunrisemedical.fr/built4me



Sunrise Medical SAS
ZAC De La Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00
E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr



Sunrise Medical se soucie de votre sécurité. Veuillez lire votre manuel d'utilisation pour connaître les consignes de sécurité et d'entretien.

Pour plus d'informations, sur les fonctions, options et accessoires, veuillez vous référer à la fiche de mesure. Sunrise Medical se réserve le droit de modifier les données techniques de ses produits sans préavis.

« Les photos figurant sur la présente brochure et sur les autres documents commerciaux de la société **SUNRISE MEDICAL** ne constituent en aucun cas un descriptif technique précis des fonctionnalités du produit concerné. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et ses conditions d'utilisation, reportez-vous à la fiche technique ou au manuel d'utilisation ».