


FONDA far⁺prisme

Stabilisation de la fixation périphérique.

BREVETÉ

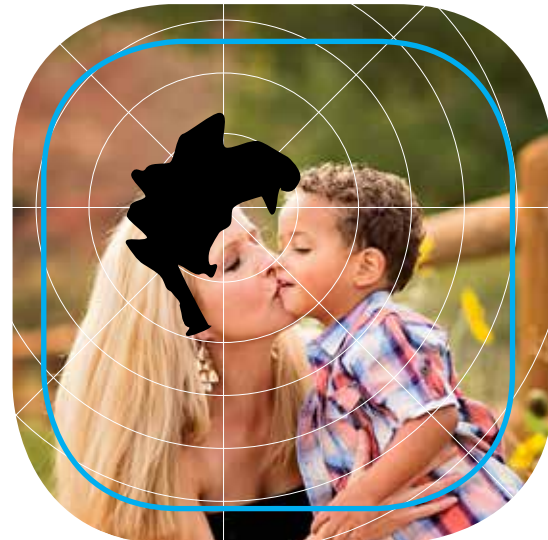


La vision avec une dégénérescence maculaire peut-être gênante à cause de la perte de vision centrale, d'une importante instabilité de la fixation et une perte de sensibilité aux contrastes.

-  Grandissement de l'image rétinienne.
-  Stabilisation du point de fixation.
-  Augmentation de la perception des contrastes
-  Amélioration posturale
-  Amélioration de la vision périphérique*

*Basé sur des réponses subjectives

S.P.O.T. Chart Subjective Prism Orientation Test for eccentric fixation stabilization

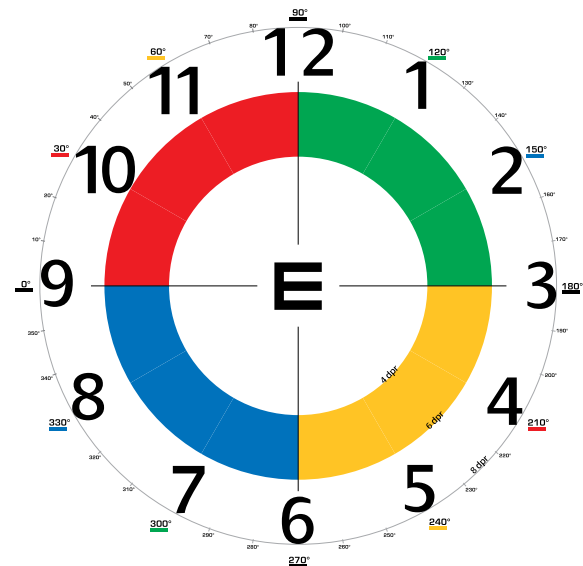

Université de Florence, 2014 Patients souffrant de Stargardt

Cas avec un résultat positif	83,3%
Augmentation du VISUS	61% (moyenne)

Les FONDA far⁺prisme et grandissement, facilitent et stabilisent le point de fixation périphérique optimisant ainsi le potentiel visuel, améliore la posture et le confort visuel. Afin de déterminer la prescription, nous avons développé une méthode incluant un optotype spécifique et un protocole testé avec succès par plusieurs universités. Spécialisé en étude clinique de la vue, permettant une évaluation qualitative du champ de vision périphérique et l'identification de la projection du scotome et de la PRL de loin.



All Weather Eye Care

Dynamic life, Dynamic vision


FONDA S.r.l.
C.so Andrea Podestà, 1
16128 Genova - ITALY

T +39 010 001 87 00
E info@fondavision.com
www.fondavision.com

FM1805FR

by  **FONDA**
Custom Vision Technology

FITmacula est un système optique
designé pour les dégénérescences maculaires.
100% made in Italy

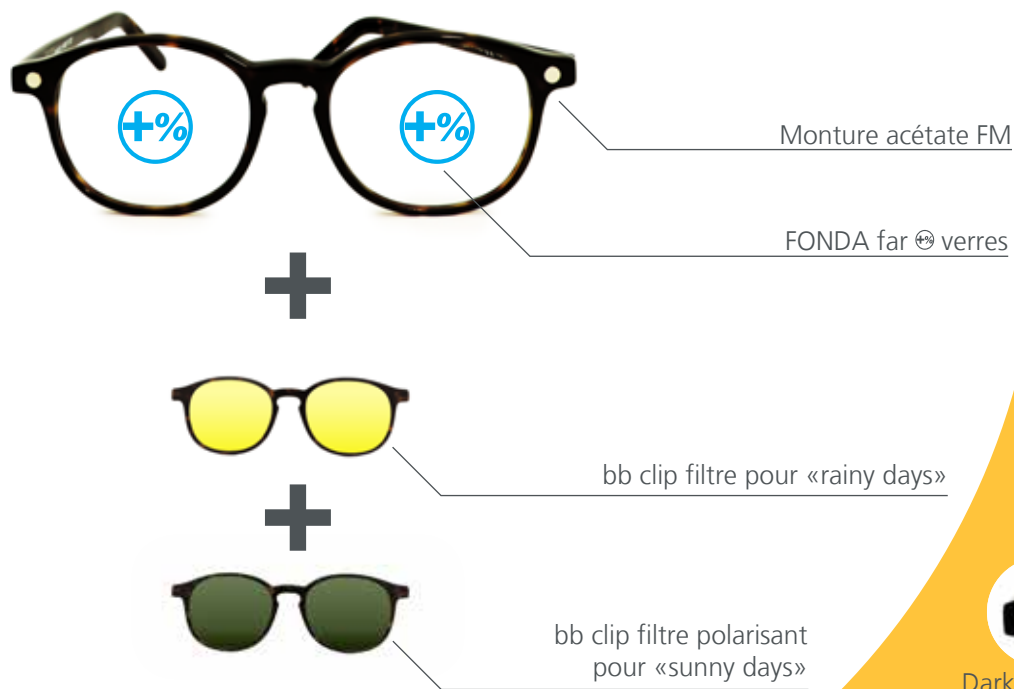


Monture FM

Nom: FM1
Matériau: Acétate Italienne
Couleur: FONDA GBG
Dark Tortoise
Taille: 48□17 145



Nom: FM2
Matériau: Acétate Italienne
Couleur: FONDA GBG
Dark Tortoise
Taille: 51□20 145

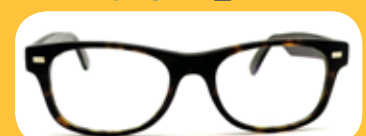

+% FONDA far verres

Verres speciaux pour la vision dynamique

Pour une vision de loin dynamique, nous avons crée Fonda far. Ces verres offrent une solution aux personnes ayant besoin d'aide dans les situations dynamiques telles que la marche, le sport ainsi que toutes les activités journalières.

Les verres FONDA far® sont développés avec des designs spécifiques pour améliorer la vision, stabiliser la fixation périphérique et fournir le confort maximum aux personnes souffrant de dégénérescence maculaire DMLA.


	+%	Prisme	Progressif
Vision résiduelle	1/20 - 7/10	1/20 - 7/10 Vision périphérique	1/20 - 7/10
Vision	Binoculaire et monoculaire	Binoculaire et monoculaire	Binoculaire et monoculaire
Grossissement	+3%; +4,5%; +6%	+3%; +4,5%; +6%	+3%; +4,5%; +6%
Addition	-	-	max +4.00
Type de verre	CR39 index 1.500	CR39 index 1.500	CR39 index 1.500; 1.600;1.670;1.740
Puissance prismatique	-	de 2 à 10 d.pr.	de 2 à 10 d.pr.
Traitements	Anti-glare (Anti-reflet) Filtre thérapeutique F-glare (miroir)	Anti-glare (Anti-reflet) Filtre thérapeutique F-glare (miroir)	Anti-glare (Anti-reflet) Filtre thérapeutique F-glare (miroir)

All Weather Eye Care

Vos yeux et votre vision sont très sensibles. Les rayons du soleil peuvent provoquer des dangers sérieux à vis yeux même par temps couvert.

Vous devez constamment protéger vos yeux: par mauvais temps, temps gris, pluvieux, ombragé, éclairages électriques agressifs lumières bleues nocives avec clip#1; par temps ensoleillés avec clip#2.

Avec FITmacula, vous protégez votre macula
et préservez votre potentiel visuel dans toutes les conditions lumineuses.

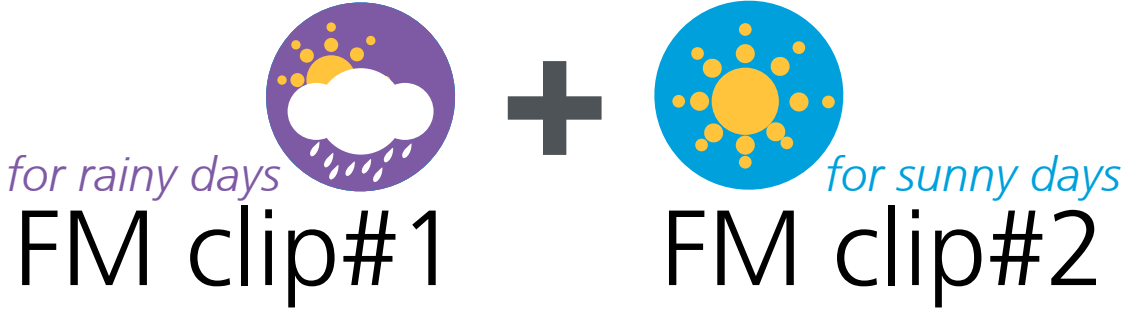

Protégeant le système visuel dans toutes les conditions de lumières.
Les verres F-glare sont la meilleure solution pour vos yeux en terme de protection, qualité optique et esthétique.
La Retine est protégée à 100% des UVA/UVB et des radiations bleues (toxiques)